



## ◆ SR-17

- 50%苯基/50%甲基聚硅氧烷
- 键合交联
- 可用溶剂冲洗
- USP固定相G3
- 类似固定相: DB-17、HP-50、Rtx-50、CP-Sil24CB、SPB-50
- 适合甾类化合物、药物、农药等的分析

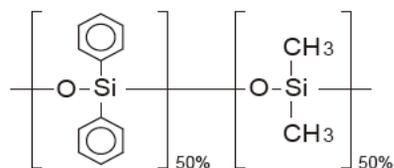

结构式

## 有机溶剂

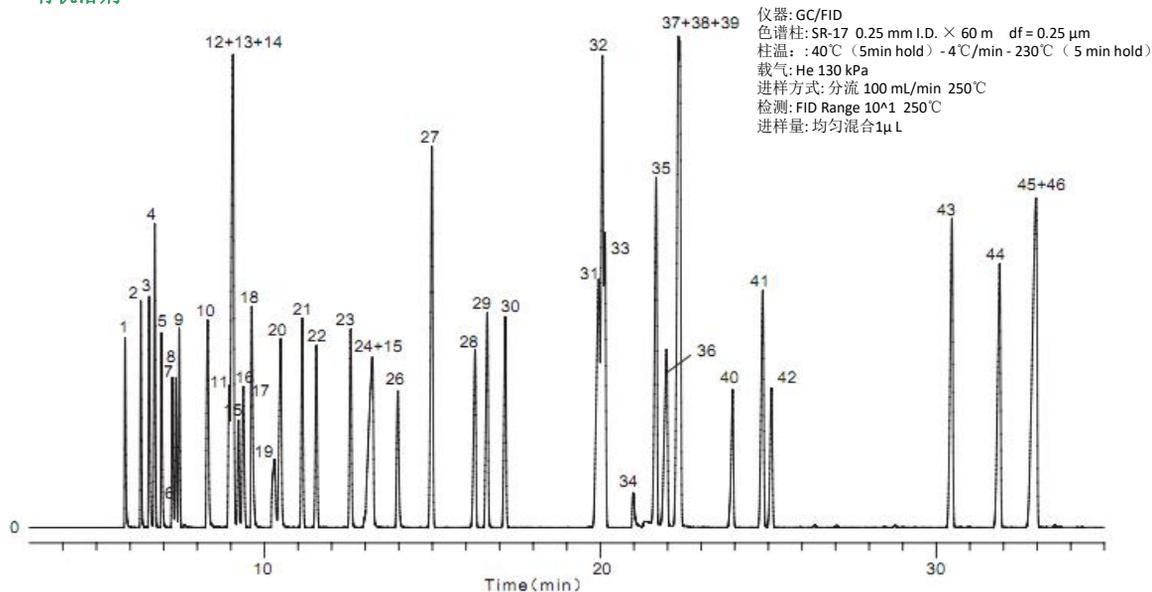

仪器: GC/FID  
 色谱柱: SR-17 0.25 mm I.D. × 60 m df = 0.25 μm  
 柱温: : 40°C (5 min hold) - 4°C/min - 230°C (5 min hold)  
 载气: He 130 kPa  
 进样方式: 分流 100 mL/min 250°C  
 检测: FID Range 10<sup>1</sup> 250°C  
 进样量: 均匀混合 1 μL

- |               |                |              |                |                  |
|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 1. 甲醇         | 11. 顺-1,2-二氯乙烯 | 21. 1,2-二氯乙烷 | 31. 对二甲苯       | 41. 环己醇          |
| 2. 乙醚         | 12. 甲乙醇        | 22. 三氯乙烯     | 32. 间二甲苯       | 42. 1,1,2,2-四氯乙烯 |
| 3. 异丙醇        | 13. 异丁醇        | 23. 醋酸正丙醇    | 33. 氯苯         | 43. 邻二氯苯         |
| 4. 正己烷        | 14. 乙酸乙酯       | 24. 异戊醇      | 34. N,N-二甲基甲酰胺 | 44. 邻二甲酚         |
| 5. 丙酮         | 15. 氯仿         | 25. 乙基溶剂剂    | 35. 邻二甲苯       | 45. 对二甲酚         |
| 6. 二硫化碳       | 16. 1,1,1-三氯乙烯 | 26. 1,4-二氧六环 | 36. 1-甲基环己醇    | 46. 间二甲酚         |
| 7. 醋酸甲酯       | 17. 四氯化碳       | 27. 甲苯       | 37. 环己醇        |                  |
| 8. 二氯甲烷       | 18. 四氢呋喃       | 28. 四氯乙烯     | 38. 丁基溶剂剂      |                  |
| 9. 反-1,2-二氯乙烯 | 19. 甲基溶剂剂      | 29. 甲基丁酮     | 39. 苯乙烯        |                  |
| 10. 2-丁醇      | 20. 正丁醇        | 30. 醋酸正丁酯    | 40. 乙酸溶剂剂      |                  |

## ◆ 订购信息

内径 (mm)	膜厚 (μm)	长度 (m)	使用温度 (°C)	订货号
0.25	0.25	15	-20-340	28111
		30	-20-340	28112
		60	-20-340	28113
0.32	0.25	15	-20-340	28211
		30	-20-340	28212
		60	-20-340	28213
0.53	1	15	-20-320	28331
		30	-20-320	28332